

• MinutenSpray classic, Alpro  
 • MinutenWipes, Alpro  
 (US) (CA)  
 • CAVICIDE  
 • CAVIWIPES

>500 LUX  
 >80 Ra

WL Clean (Alpro)...  
 www.alpro-dental.de

≥ 10 sec  
 2.5 - 3 bar

T1 Spray  
 REF 59 01 665

95°C  
 203°F  
 ≥ 10 min

1-2 s

T1 Spray

T1 Spray  
 REF 59 01 665

1-2 s

T1 Spray

134°C 274°F  
 ≥ 3 min

134°C 274°F


www.melag.de

134°C 274°F  
 ≥ 3 min

134°C 274°F

< 140°C  
 < 284°F

3 - 18 min  
 (2,04 bar  
 29,59 psi)

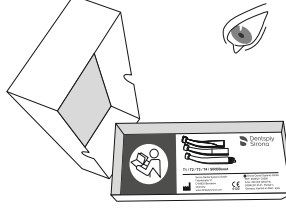

⚠ Diese Übersicht der Aufbereitung ist vereinfacht dargestellt. Eine Abfolge der Maßnahmen ist von den praxisinternen technischen Voraussetzungen abhängig. Die Gebrauchsanweisung der zur Anwendung kommenden Hand- und Winkelstücke und Turbinen sowie der Geräte sind zu beachten! Eine maschinelle Aufbereitung ist der manuellen Aufbereitung vorzuziehen.

⚠ This preparation overview is presented in simplified form. The sequence of measures depends on the technical requirements of each practice. The operating instructions of the applied handpieces, contra-angle handpieces, turbine and the devices are to be observed!

⚠ Este resumen del acondicionamiento se ha simplificado. La secuencia de medidas depende de los requisitos técnicos internos de la clínica. ¡Debe observarse el Manual del operador de las piezas de mano, contra-ángulos y turbinas, así como de los aparatos!

⚠ Dit overzicht voor de voorbereiding is vereenvoudigd weergegeven. Een volgorde van de maatregelen is afhankelijk van de praktische, interne, technische voorwaarden. De gebruiksaanwijzingen die voor de gebruikte hand- en hoekstukken en turbinen worden gebruikt, alsook voor de apparaten, moeten in acht worden genomen!

⚠ Ce récapitulatif fournit une représentation simplifiée du traitement des instruments. L'ordre des mesures dépend des conditions techniques propres au cabinet. Observez les notices d'utilisation des pièces-à-main, des contre-angles et des turbines ainsi que des appareils utilisés !

⚠ La presente panoramica sulla preparazione è rappresentata in maniera semplificata. La sequenza di misure dipende dei requisiti tecnici interni della clinica. Rispetta le istruzioni d'uso die manipoli/contragogli, delle turbine e degli apparecchi utilizzati.

Helix:  
 REF 58 92 042

Indicators (100x):  
 REF 59 03 641

Bowie & Dick:  
 REF 58 92 034

Sirona Dental Systems GmbH  
 Fabrikstraße 31  
 D-64625 Bensheim  
 Germany  
 www.dentsplysirona.com

© Sirona Dental Systems GmbH  
 REF: 59 58 579, 59 58 587, 59 58 595,  
 59 58 603, 59 58 611, 59 58 629,  
 64 12 493, 62 01 730  
 Ä-Nr.: 124 375 (11/2017)  
 D3300, 104\_01\_09\_09 Printed in  
 Germany. Imprimé en Allemagne

0123

