

Kompakt und Intelligent – Der neue Hygopac View

Sterilgutverpackung nach allen Regeln der Kunst – und den gesetzlichen Vorgaben



DRUCKLUFT
ABSAUGUNG
BILDGEBUNG
ZAHNERHALTUNG

HYGIENE
▪ INSTRUMENTE

Der kompakte Hygopac View – Schnelle Sterilgutverpackung, sicher und validierbar

Nie war Instrumentenverpackung so einfach und zuverlässig.

Bei jeder einzelnen Verpackung können Sie sicher sein, dass alle Vorgaben der Norm DIN EN ISO 11607-2 und die Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Sterilgutversorgung (DGSV) erfüllt sind.



Hygopac View im Überblick

- Außerordentlich kompaktes Design für einen minimalen Platzbedarf im Aufbereitungsraum
- Zuverlässig – dank hochwertiger Komponenten für einen wartungsfreien Betrieb
- Intuitives Bedienkonzept zur schnellen und einfachen Durchführung des Verpackungsprozesses
- Validierung leicht gemacht dank intelligentem und einfachem Validierungskonzept
- Hohe Flexibilität bei der Prozessdokumentation durch Speicherung auf SD-Karte und Netzwerkanbindung
- Intuitive und benutzerfreundliche Bedienung via Touch Display

Sterilgutverpackung als Beutel oder von der Rolle. Hygopac packt's:

Sparen Sie Zeit durch schnelle, normgerechte Verpackung und sparen Sie Kosten bei Rollenware – jetzt mit aufgedrucktem Lineal zum praktischen Ablängen. Mit oder ohne die flexibel einsetzbare Hygofol Station.



Versiegeln mit System.


Mit dem Zubehör und den Verpackungsfolien aus dem Hygopac System meistern Sie die Arbeit mit links. Der tägliche Siegelnahttest Hygopac Sealcheck ermöglicht die tägliche Kontrolle der Siegelnahtqualität auf einen Blick und bringt so ein zusätzliches Stück Sicherheit.



Instrumententisch und Hygofol Station zur Tischaufstellung



Hygofol Station wandhängend

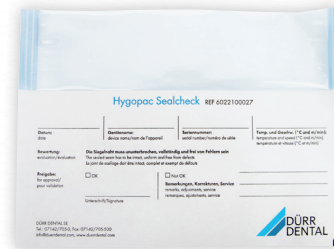


Hygopac Sealcheck, täglicher Siegelnahttest

Der Hygopac View stellt die neue Generation des Durchlaufsiegelgerätes Hygopac Plus dar.

Mit seiner außerordentlich kompakten Bauweise vereint der Hygopac View modernes, funktionales Design mit einem intuitiven Bedienkonzept. Auf diese Weise wird der Verpackungsprozess bei der täglichen Wiederaufbereitung von Medizinprodukten einfach und schnell.



Überwachung via Software

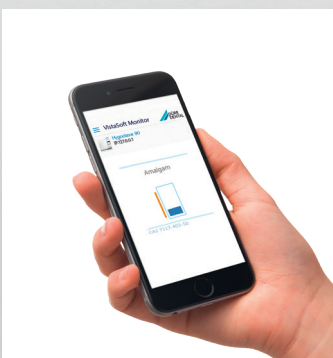

- Überwachung des Gerätestatus via Netzwerk
- Automatische Protokollierung der durchgeführten Siegelvorgänge
- Erhöhte Betriebssicherheit
- Schnelle Hilfe im Servicefall

Hygopac

Durchlaufsiegelgerät für die Verpackung von Klarsichtsterilisiervpackungen



Hygopac View

Validierbares Durchlaufsiegelgerät gemäß DIN EN ISO 11607-2



	Hygopac	Hygopac View
Technische Daten		
Spannung	230 V	230 V / 1 ~
Netzfrequenz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Elektrische Leistung	550 W	> 900 W
Heizleistung	2 x 250 W	2 x 400 W
Aufheizzeit	ca. 3 min	ca. 3 min
Siegeltemperatur	bis 240 °C	bis 210 °C
Temperatureinstellung	stufenlos	exakt in 5 °C-Schritten
Siegelgeschwindigkeit	5,3 m/min	3 Stufen wählbar (5 m/min, 7 m/min, 9 m/min)
Siegelnahtbreite	9 mm	13 mm
Gewicht	7,2 kg	7,8 kg
Abmessungen (H x B x T)	160 x 435 x 135 mm	170 x 370 x 140 mm
Zeitersparnis gegenüber Balkensiegelgeräten	●	●
Touchdisplay		●
Validierung		
Automatische Prozessüberwachung (Siegeltemperatur, Siegelgeschwindigkeit, Anpressdruck)		●
Funktionsbeurteilung	●	●
Werkseitige Leistungsbeurteilung	●	●
Speicherung der Siegelparameter		●
Automatische Datenspeicherung per SD-Karte oder über Netzwerk		●