

#whdentalwerk



video.wh.com

Jetzt bei Ihrem
Fachhändler oder
auf **wh.com**



Luftscaler schnell und kraftvoll



proxeo SONIC

Prophylaxe mit Stil

Schnell und kraftvoll.

Der luftbetriebene Scaler mit integriertem Spray und zwei großen Lichtaugen ist ideal zur maschinellen Entfernung von Plaque und Zahnstein sowie zur Wurzeloberflächenreinigung. Das Ergebnis: Gesteigertes Wohlbefinden und Selbstbewusstsein Ihrer Patienten durch saubere Zahnoberflächen.



Stufenlos regulierbar

Der kraftvolle und kontrollierte Einsatz der Leistung kann je nach Anwendung über den Leistungsregler angepasst werden.



Große Lichtaugen

Zwei große Lichtaugen sorgen für eine Ausleuchtung der Behandlungsstelle.




Spitzenwechsler

Einfaches Wechseln der Spitzen und Schutz vor Verletzungen mit dem W&H Spitzenwechsler.



Integrierter Spray

Das integrierte Spray kühlt die Behandlungsstelle konstant.

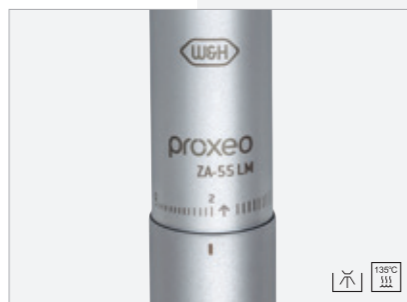

Designed für erstklassige Hygiene

Die Instrumente sind aufgrund Ihrer glatten Oberfläche effizient zu reinigen und sowohl thermo-desinfizierbar als auch sterilisierbar.

Spitzen für jede Anwendung

Vielfältig und ergonomisch designed.

Die Vielfalt des Spitzensortiments und das optimale Design jeder einzelnen Spitze ermöglicht Ihnen eine schonende und gründliche Zahnsteinentfernung auch an schwer zugänglichen Stellen.¹



Prophylaxe Spitze 1AU

Für Zahnsteinentfernung, universell einsetzbar, auch für gekrümmte Molar-Flächen mit lingualer Neigung.



Prophylaxe Spitze 2AU

Für Frontzähne im Unterkiefer, linguale Flächen, in Fällen von stark haftender dicker und harter Zahnsteinbänder.




Prophylaxe Spitze 3AU

Für Belagsentfernung am Zahnhals und auch für Abtragung von Nikotinbelägen.



Parodontologie Spitze 1AP

Entfernung von subgingivalen Ablagerungen, besonders geeignet für tiefe Parodontaltaschen.

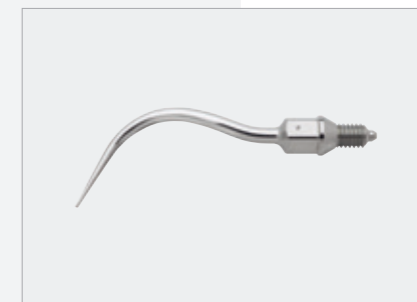

Parodontologie Spitze 2APr, 2API

Entfernung von subgingivalen Ablagerungen. Nach rechts oder nach links gebogen erhältlich.



Parodontologie Spitze 3AP

Mit einer Diamantierung an der Instrumentenspitze für das parodontale Debridement von Furkationen und Konkavitäten.

¹Seidel, M., Borenus, H., Schorr, S. et al. Results of an experimental study of subgingival cleaning effectiveness in the furcation area. BMC Oral Health 21, 381 (2021).

Technische Daten

Proxeo Luftscaler



Typ:	ZA-55 LM / ZA-55 LS	ZA-55 / ZA-55 M
Licht:	Ja	Nein
Leistungsregelung:	Ja	Nein
Schwingfrequenz:	6 kHz	
Schwingamplitude:	< 200 µm*	
Betriebsdruck:	3,4 ± 0,3 bar	
Kühlmittelmenge:	20–50 ml/min	
Kupplung:	RM-34 LED, Multiflex®** / Sirona®**	RQ-3, RQ-4, RQ-14 / Multiflex®**
Verwendbare W&H Spitzen:	1AU, 2AU, 3AU, 1AP, 2API, 2APr, 3AP Spitzen anderer Hersteller müssen für W&H Luftscaler freigegeben sein.	

* Abhängig von der Spitze und Leistungseinstellung.

** Multiflex® und Sirona® sind Marken von Drittparteien, die mit W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH nicht in Verbindung stehen.



Typ:	ZE-55 BC	ZE-55 RM
Licht:	Nein	
Leistungsregelung:	Nein	
Schwingfrequenz:	6 kHz	
Schwingamplitude:	< 200 µm*	
Betriebsdruck:	2,5 ± 0,3 bar	
Kühlmittelmenge:	20–50 ml/min	
Kupplung:	 Fixanschluss 	
Verwendbare W&H Spitzen:	1AU, 2AU, 3AU, 1AP, 2API, 2APr, 3AP Spitzen anderer Hersteller müssen für W&H Luftscaler freigegeben sein.	



W&H Kupplung RM-34 LED für Multiflex®**-Anschluss

- › Einsatz von LED ohne notwendiger Anpassung der Dentaleinheit
- › Lange Lebensdauer der LED
- › Stufenlose Regelung der Spraywasserzufuhr
- › Rücksaugstopp
- › 24 Monate Garantie

Abb. Symbolfotos. Zusatzausstattung und Inhalt der gezeigten Zubehörteile sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Hersteller:

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
51111 Bürmoos, **Austria**
t +43 6274 6236-0
f +43 6274 6236-55
office@wh.com
wh.com

Vertrieb:

W&H Deutschland GmbH
Ludwigstraße 27
83435 Bad Reichenhall, **Deutschland**
t +49 8651 904 244-0
f +49 8651 904 244-4
office.de@wh.com
wh.com

W&H Austria GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53
51111 Bürmoos, **Austria**
t +43 6274 6236-239
f +43 6274 6236-890
office.at@wh.com
wh.com

W&H CH-AG
Industriepark 9
8610 Uster, **Schweiz**
t +41 43 4978484
f +41 43 4978488
info.ch@wh.com
wh.com

20403 ADT Rev. 005 / 26.09.2024
Änderungen vorbehalten